


WatchPAT™ ONE

Manuale di istruzioni

La confezione di WatchPAT™ ONE contiene:

1. Manuale di istruzioni
2. Dispositivo WatchPAT™ ONE - con sonda per dito (1) e sensore toracico (2)*
3. Batteria AAA (3)

*Il sensore toracico non è incluso in WatchPAT™ ONE E

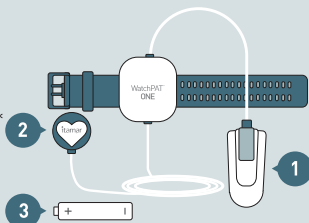

Leggere le seguenti istruzioni prima di applicare WatchPAT ONE:

Scaricare sul proprio smartphone l'applicazione WatchPAT ONE (disponibile su Apple App Store o Google Play).

Note: Nota: Assicurarsi di avere a disposizione il PIN a quattro cifre per attivare il dispositivo.

- Togliere abiti stretti, anelli, orologi e altri gioielli.
- Rimuovere eventuale smalto o unghia finta dal dito scelto per l'esame e assicurarsi che l'unghia sia tagliata corta.
- Indossare il dispositivo sulla mano non dominante, applicando la sonda per dito su qualsiasi dito ad eccezione del pollice.

Note: per l'applicazione del dispositivo può essere necessaria la supervisione di un adulto.

Funzionamento del dispositivo:

Preparazione all'esame:

- Spegnerne tutti i dispositivi di trasmissione presenti nella stanza, quali smartwatch, altri smartphone o cuffie wireless, perché potrebbero interferire con il test
- Aprire l'applicazione WatchPAT ONE sul dispositivo mobile.
- Seguire le istruzioni sull'applicazione, che guideranno l'utente attraverso le fasi dell'esame.

Nota: lo smartphone deve essere collegato a internet durante la configurazione del dispositivo WatchPAT ONE per l'esame.

Al termine dell'esame:

1. Premere il tasto **STOP RECORDING** (Interrompi registrazione) nell'applicazione WatchPAT ONE e seguire le istruzioni.
2. Se l'applicazione è chiusa, aprirla, assicurarsi che il proprio telefono sia connesso a internet e attendere la notifica **"Thank you"** (Grazie).

Nota: solo quando sull'applicazione si vede il messaggio **"Thank you"** (Grazie) significa che l'esame è stato completato e che i risultati sono stati inviati allo specialista in medicina del sonno.

Spiegazione dei simboli



Monouso, non riutilizzare



Limiti di temperatura: 0 °C - 40 °C



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso

1.5V DC

Tensione di esercizio della batteria

IP22

Protezione da agenti esterni



Parte applicata di tipo BF

FCC ID
ZAPUBWPN0E

Numero di identificazione della Federal Communications Commission



Produttore del dispositivo medico

REF

Codice

SN

Numero di serie



Data di fabbricazione



Data di scadenza



Il prodotto è contrassegnato dal logo CE 2797 per BSI

EC REP

Rappresentante autorizzato per l'Unione Europea



Secondo la Direttiva RAEE 2012/19/UE, tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere raccolti separatamente e non smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire questo prodotto e tutte le sue parti in modo responsabile ed ecologico.



Fragile, maneggiare con cura



Mantenere asciutto



Note importanti:

- Temperatura di conservazione e utilizzo: 0 °C - 40 °C
- Non tentare di collegare o scollegare le parti dell'unità.
- Non tentare di introdurre corpi estranei nell'unità.
- Non provare in alcun caso a risolvere un problema da soli.



Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598
Help desk:
Italy 800782332

EC REP

Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany

+
itamar
medical

www.itamar-medical.com